

规格参数

项目	参数
高速手机转速	360,000~420,000 转/分钟
低速手机转速	20,000 转/分钟
储气罐容量	9L
净水瓶容量	1000mL
污水瓶容量	1000mL
洁牙机工作频率	28KHz
噪音	≤65dB
净重	38kg
机器尺寸	505×420×773mm
电源输入	220VAC 50/60Hz 110VAC 60Hz

产品配置

物件名称	数量
主机	1pcs
洁牙手柄	1pcs
高速手机	1pcs
低速手机	1pcs
水/气/雾三用喷枪	1pcs
吸唾手柄	1pcs
净水瓶	1pcs
污水瓶	1pcs
电源线	1pcs
高速手机车针	10pcs(锥形裂钻*5+球钻*5)
一次性抛光杯	5pcs
一次性吸引头	25pcs
洁牙工作尖	5pcs
光固化	选配
口腔内窥镜	选配




深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司

地址：广东省深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷三期7栋A座9、19、20层，D座9层
电话：400-966-9516 售前邮箱：rwd@rwdls.com 售后邮箱：service@rwdls.com
官网：www.rwdls.com
D-Prime 动物牙科工作站-20251203-CN



D-Prime
动物牙科工作站

RWD | 瑞沃德

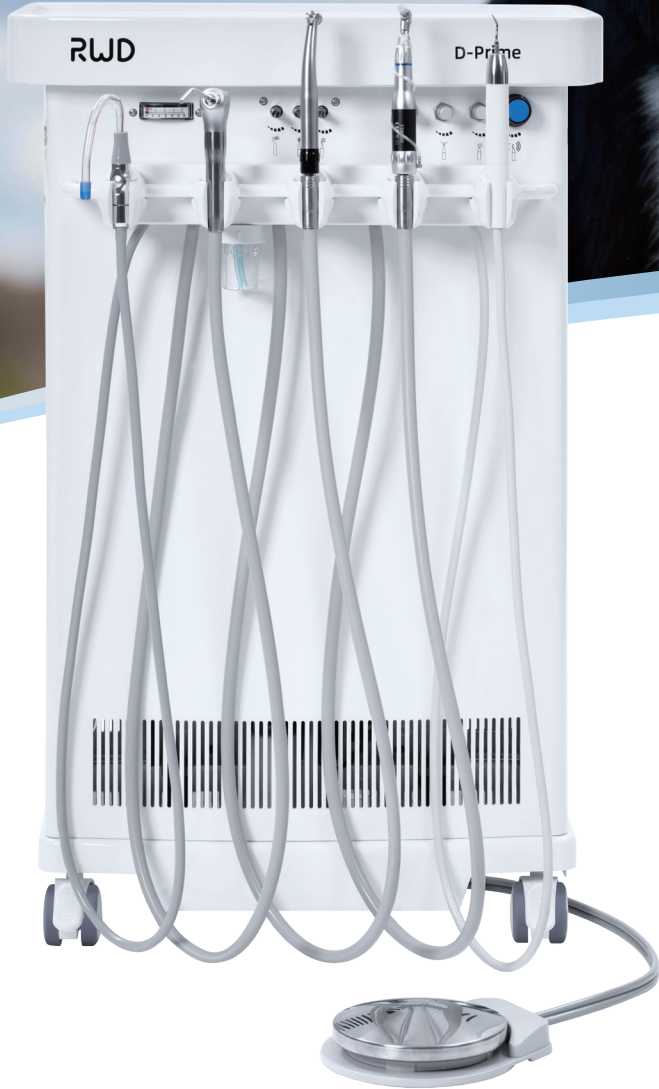

省心
从“齿”开始

懂动物, 才专业

D-Prime

动物牙科工作站

集成切割、打磨、抛光、洁牙、冲洗与吸唾等牙科核心功能，以一机实现标准化牙科治疗流程。其独立运行、即装即用的设计，帮助诊所快速搭建专业牙科能力，减少设备投入与维护成本。让科室升级更轻松，让诊疗效率显著提升。



标配五大手柄
高速手机、低速手机、洁牙机、三用喷枪、吸唾手柄，功能齐全，一机多用



高品质高/低速手机
支持快插和360°旋转，顺应性强，有效降低手部疲劳



自带LED光源
高速手机与洁牙机均配备LED光源，提供明亮清晰视野，提升操作安全性与舒适度



大容量水瓶系统
配备1000mL净水瓶及污水瓶，满足临床日常使用需求



无油空气压缩机
采用高品质无油压缩机，气源洁净无油污染，免去日常加油维护的烦恼



9L大容量储气罐
确保压力均衡持久供应，减少充气次数，操作更高效




超低噪音设计
全包式机身结构，噪音≤65dB，打造安静诊疗环境




顶部置物平台
大面积台面，便于摆放手术器械和常用物品，提升临床效率



轻量化机身
整机仅重38kg，配备顺滑万向脚轮，灵活移动，方便操作

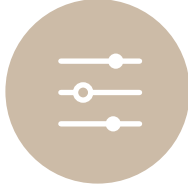

独立调控功能
高速手机、低速手机及洁牙机的水量和压力均可独立调节，满足多种临床需求，操作更灵活高效

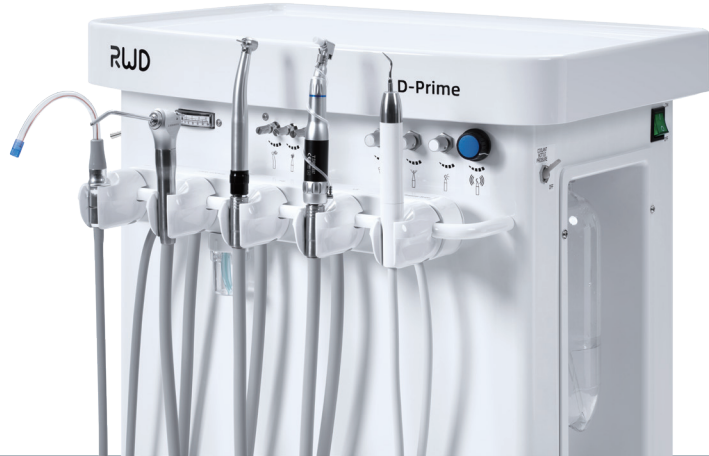

标配五大手柄



高速手机，动力强劲




低速手机，扭力充足



美国进口洁牙机，LED光源可灭菌



水/气/雾三用喷枪

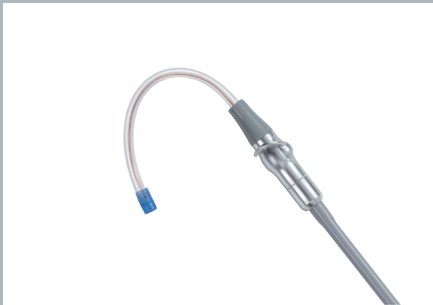

电动吸唾，流速>1200 mL/min